


눈밑 지방 시술 전후

시술 전과 5주 후 비교

시술 전



시술 5주 후

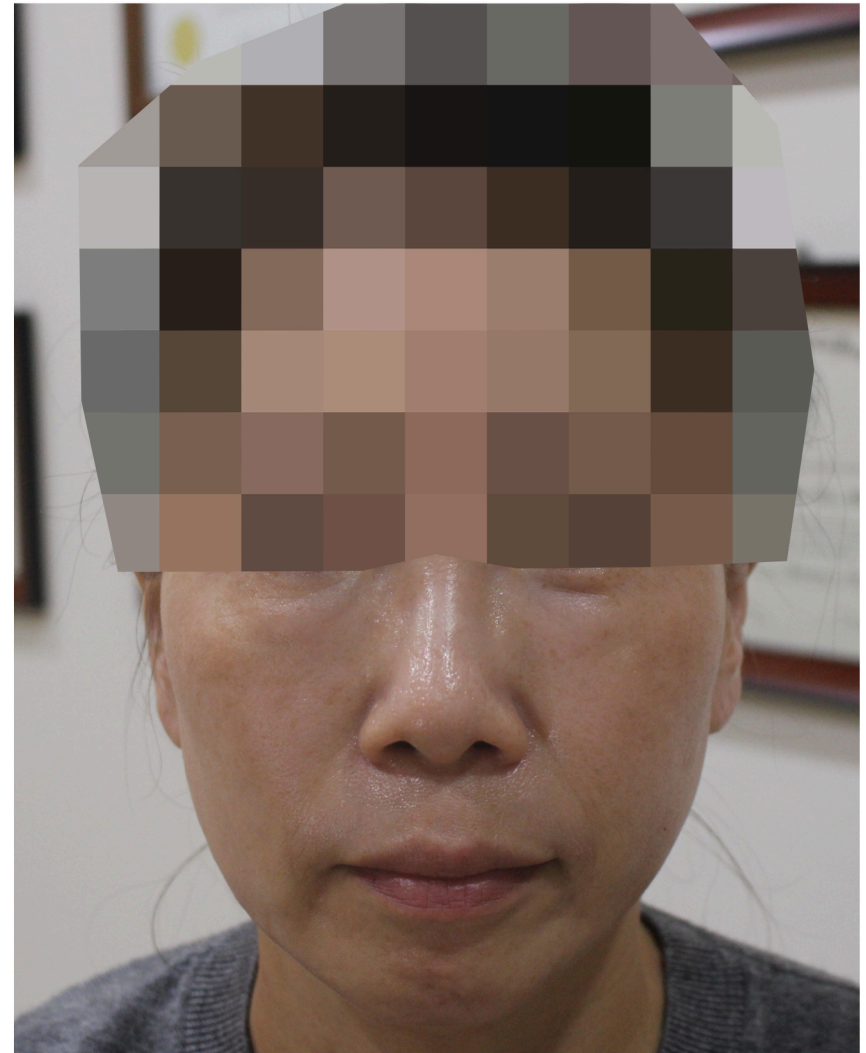

촬영 조건은 서로 다를 수 있습니다.

패치 부착과 시술 직후


패치 부착 모습과 시술 직후 상태

블랙다이아몬드 패치 부착



눈밑, 볼, 턱선 부위의 패치 부착 모습

시술 직후

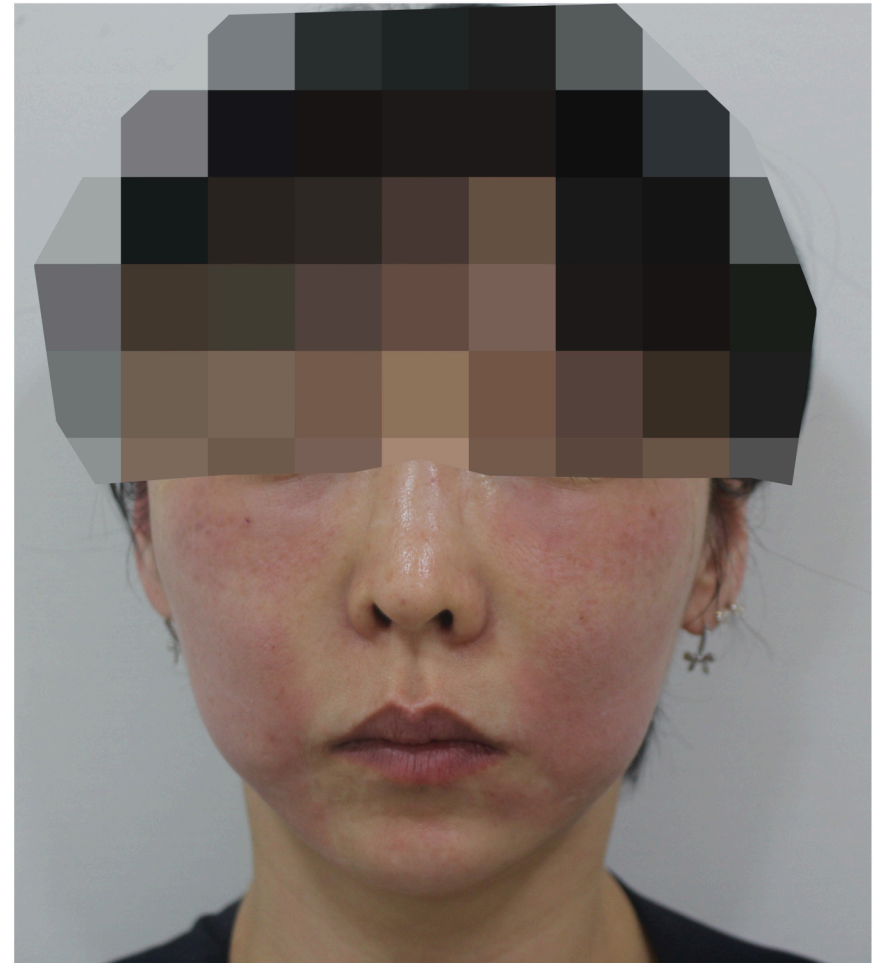


시술 직후의 붓기와 홍반

다음 페이지에서 시술 전과 2주 후 경과를 비교합니다.


Full Face Lifting 시술 전후

시술 전과 2주 후 비교

시술 전

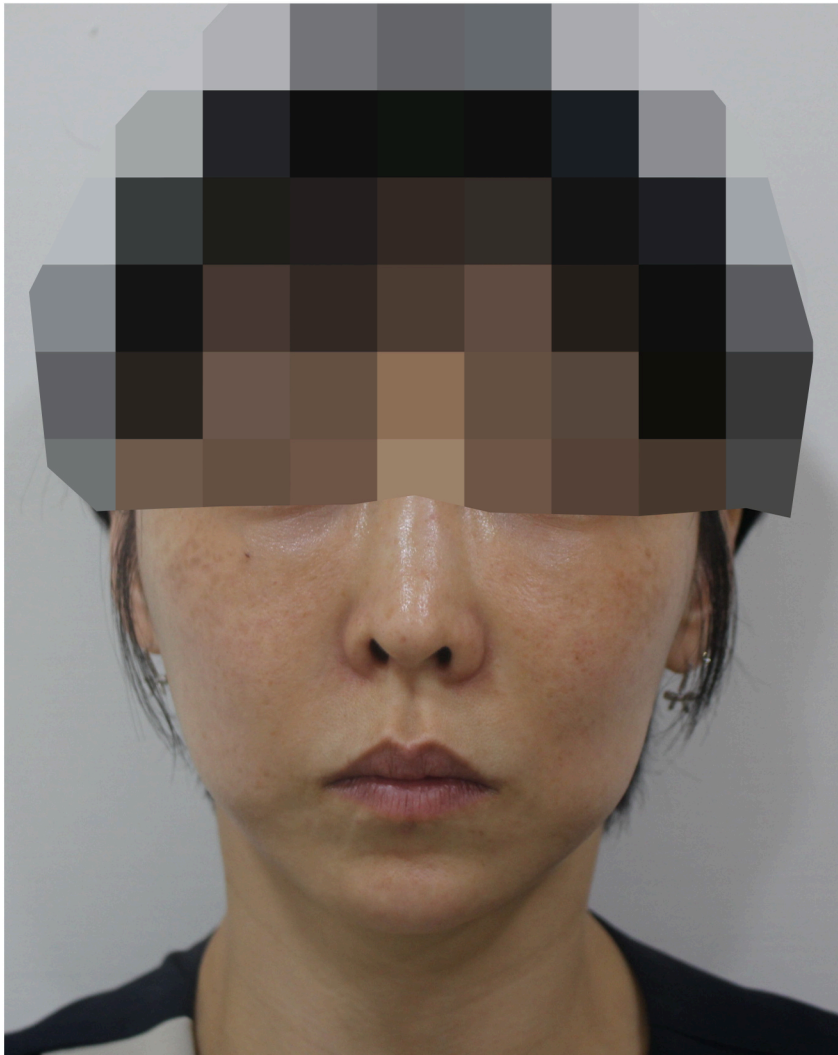

시술 2주 후

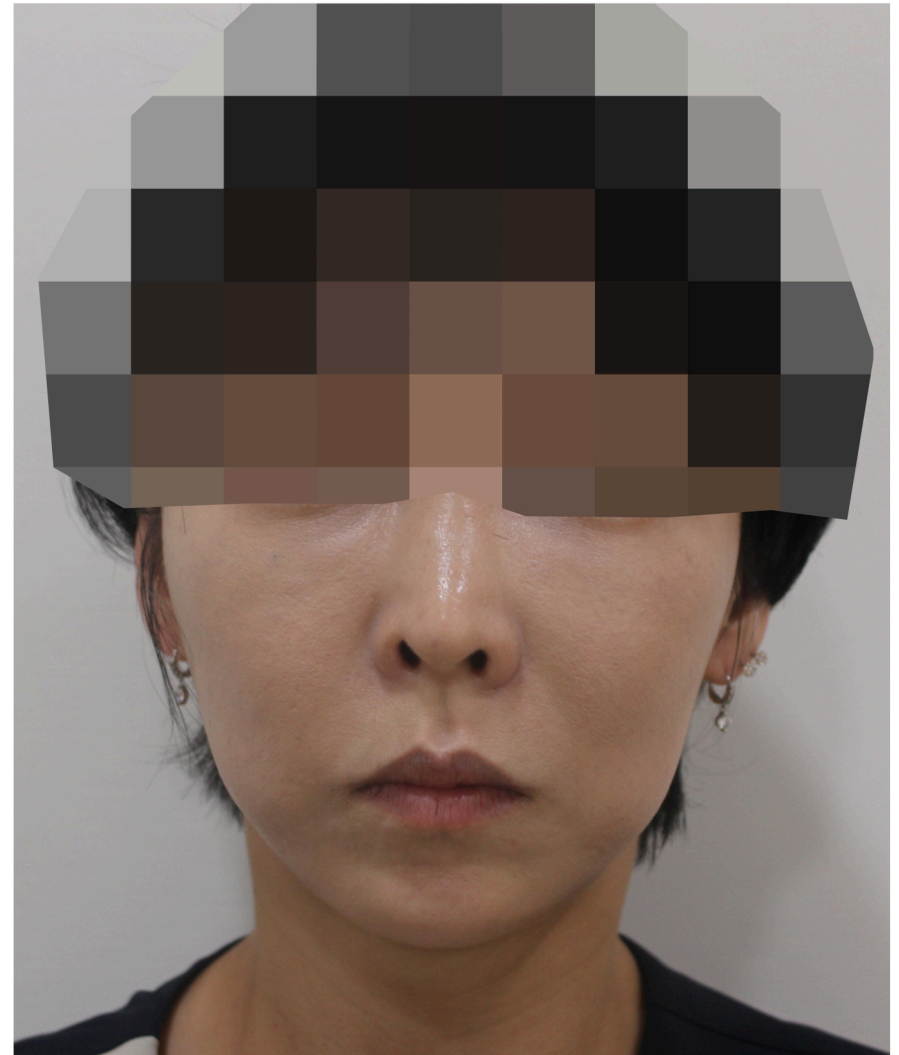

촬영 조건은 서로 다를 수 있습니다.

시술 디자인과 패치 부착 ①

01 눈밑 부위 표시

00:14



눈을 위로 보게 한 후, 눈밑지방 부위를 표시합니다.

02 눈밑 패치 부착

00:48



눈을 위로 보게 하고, 눈밑지방을 충분히 덮을 수 있게 패치를 붙입니다.

03 패치 위 표시선

01:34



표시한 라인을 따라, 패치 위에 눈밑지방 경계선을 다시 그립니다.

04 양쪽 볼 패치 부착

01:56



양 뺨 부위에 패치를 붙입니다.

시술 디자인과 패치 부착 ②

05 턱선 패치 부착

02:10



심술지방과 턱선 부위에 패치를 붙입니다.

06 귀밑 패치 부착

02:20



양쪽 귀 밑 부위에 패치를 붙입니다.

07 거즈 삽입 장면

02:32



레이저 충격파가 치아를 시리게 하므로, 입안에 치아 외측으로 거즈를 삽입합니다.

08 반창고 부착 장면

02:56



이렇게 반창고를 붙이면, 레이저 충격파를 눈밑지방에 효과적으로 전달할 수 있습니다.

부위별 시연 과정 ①

01 시연 전 준비 상태

01:44



보안경 착용 필수!

02 눈밑 부위 시연

02:06



눈밑지방 부위에 집중적으로 레이저를 쏩니다.

03 눈 주변 부위 시연

02:38



눈물도랑 이외의 눈 주변 피부에 레이저를 쏩니다.

04 볼 부위 시연

03:14



뺨 부위에 레이저를 쏩니다.

부위별 시연 과정 ②

05 턱선 부위 시연

04:41



턱 선과 심술지방 부위에 레이저를 쏩니다.

06 귀 밑 부위 시연

05:48



귀 밑 부위에 레이저를 쏩니다.

07 패치 제거 장면

06:45



부위별로 집중시술이 필요한 정도에 따라 세션 수를 다르게 할 수 있습니다.

08 시연 마무리

06:53



시술 후에는 각각의 부위가 약간의 홍반과 붓기가 있는 정도입니다.


시술 자세와 양손 압박

환자 자세와 압박 부위

환자 각도 약 45도



시술 자세

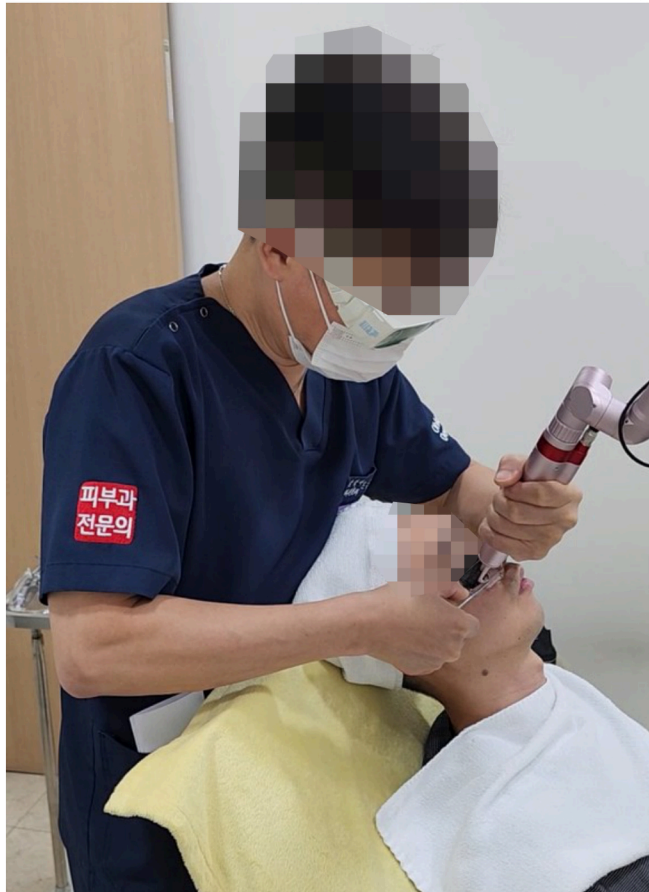

압박 부위 근접 장면



시술 자세

약 45도로 세워 앉기 / 압박렌즈 압박 + 레이저 핸드피스 팁 압박